



# FOTÓMETRO SDM 1



## Para análisis de la concentración de semen - Rápido, Exacto, Fácil

El SDM 1 es un fotómetro compacto, muy exacto, desarrollado para la medición de concentración de células espermáticas. Puede ser calibrado para las especies bovina, canina, equina, porcina y pequeños rumiantes. Su limpieza es fácil, su mantenimiento es mínimo. La concentración de semen es indicada en millones de células espermáticas/ml.

### Sus beneficios

- No es necesaria la dilución de muestras de semen
- Fuente de luz por diodo luminoso (LED) proporciona una entrega estable, reduciendo con ello la necesidad frecuente de recalibración
- La cubeta es fijada exactamente en la posición correcta de medición
- El usuario activa el análisis, una vez que la cubeta se encuentra en posición de medición
- Se efectúan lecturas múltiples de cada muestra que son promediadas para proporcionar un resultado exacto
- Fácil de limpiar y mantener: Simplemente levante la tapa del portador de la cubeta y límpielo
- La calibración es efectuada automáticamente con la medición de cada muestra
- Las actualizaciones de software son efectuadas por conexión de interfase


<b>SDM 1 Porcino</b>	REF. : <b>12300/0100</b>
<b>SDM 1 Equino</b>	REF. : <b>12300/0101</b>
<b>SDM 1 Bovino</b>	REF. : <b>12300/0102</b>
<b>SDM 1 Canino</b>	REF. : <b>12300/0103</b>
<b>SDM 1 Ovino/Caprino</b>	REF. : <b>12300/0104</b>

**Software multiespecie**  
reprogramador otras especies REF. : **12300/0130**


**Microcubeta para SDM 1, 100/caja** REF. : **12300/1111**

### Detalles Técnicos

- Peso: 1.5 Kg (peso neto)
- Dimensiones: 25 x 13 x 5.5 cm (aprox.)
- Display: diodo luminoso (LED)
- Suministro eléctrico: 110 - 230 V / 50 - 60 Hz y Batería

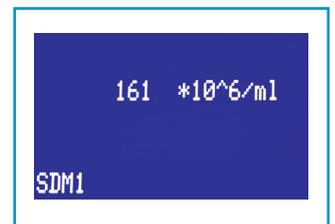

Resultado en millón de células espermáticas/ml

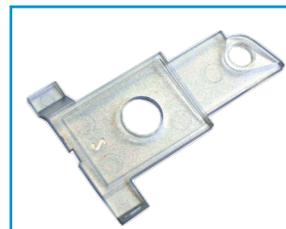

Microcubeta para fijación segura